

Anleitung HDS

I Vorbereitung (Individuellen Account anlegen und HDS-Manager für Download runterladen)


1. Internetseite <https://healthdataspace.org/> aufrufen.
2. Punkt „**Browser**“ anklicken, dann öffnet sich eine neue Seite.



3. Auf **Registrieren** klicken: Arzt auswählen und alle Pflichtfelder ausfüllen, den Lizenzvereinbarungen durch setzen eines Hakens unten links zustimme und auf **Konto erstellen** klicken.

Dieser Account ist kostenlos, aber auf ein Datenvolumen von 1GB begrenzt. Das begrenzte Datenvolumen ist kein Problem, wenn die Daten lokal auf dem eigenen PC oder im eigenen PACS archiviert werden, da sie dann im Account nach dem Download wieder gelöscht werden können.

4. Nach Eingabe aller Daten wird eine E-Mail-Bestätigung an die zuvor eingegebene E-Mail-Adresse gesendet, die noch aufgerufen werden muss, um den Zugang zu aktivieren (geht in wenigen Minuten).
5. Nach der Aktivierung dann wieder auf <https://healthdataspace.org/> gehen und den Punkt „**Browser**“ anklicken oder alternativ direkt auf <https://app.healthdataspace.de/>. -> Anlegen eines Lesezeichens/Favoriten ist sinnvoll für schnellen Zugriff.
6. Mit den eigenen Daten (Benutzername (bei Anmeldung angegebene E-Mail Adresse) und

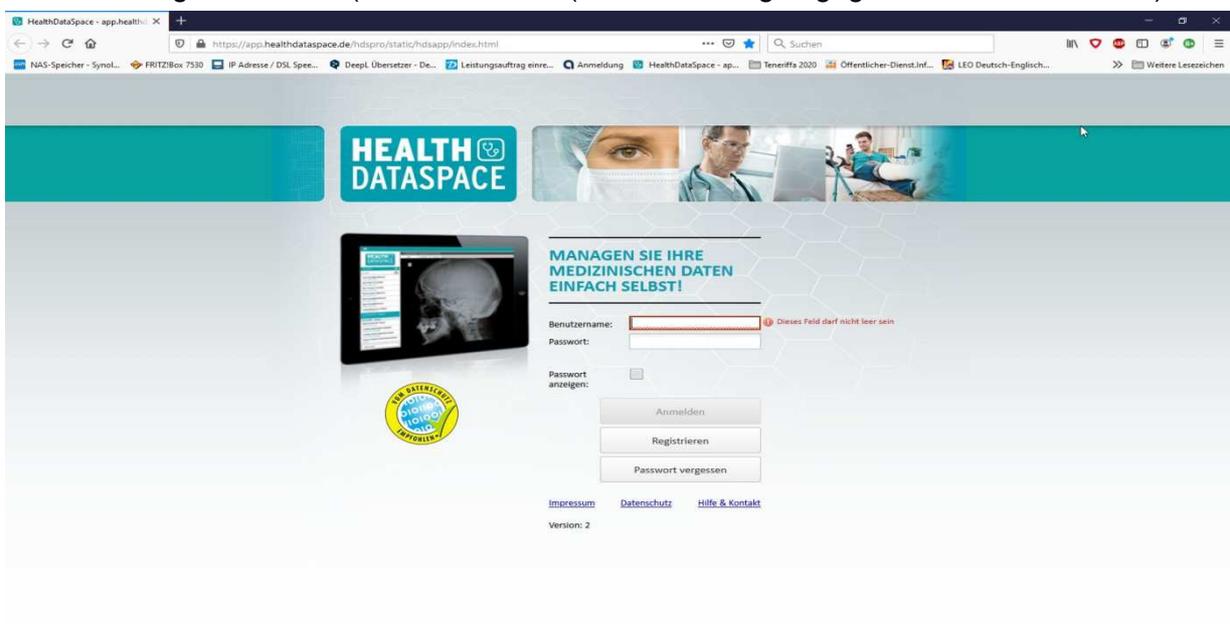


Passwort) anmelden und den Account aufrufen. Das sich öffnende Fenster mit dem Wiederherstellungscode kann geschlossen werden (ggf. vorher Code abspeichern oder notieren).

7. Links oben auf die drei Striche klicken.

8. Es öffnet sich ein Fenster links mit verschiedenen Punkten, hier „**Downloads**“ anklicken.

9. Auf der neuen Seite dann auf das türkise Downloadsymbol rechts neben **Manager Installer** klicken und die Software runterladen.

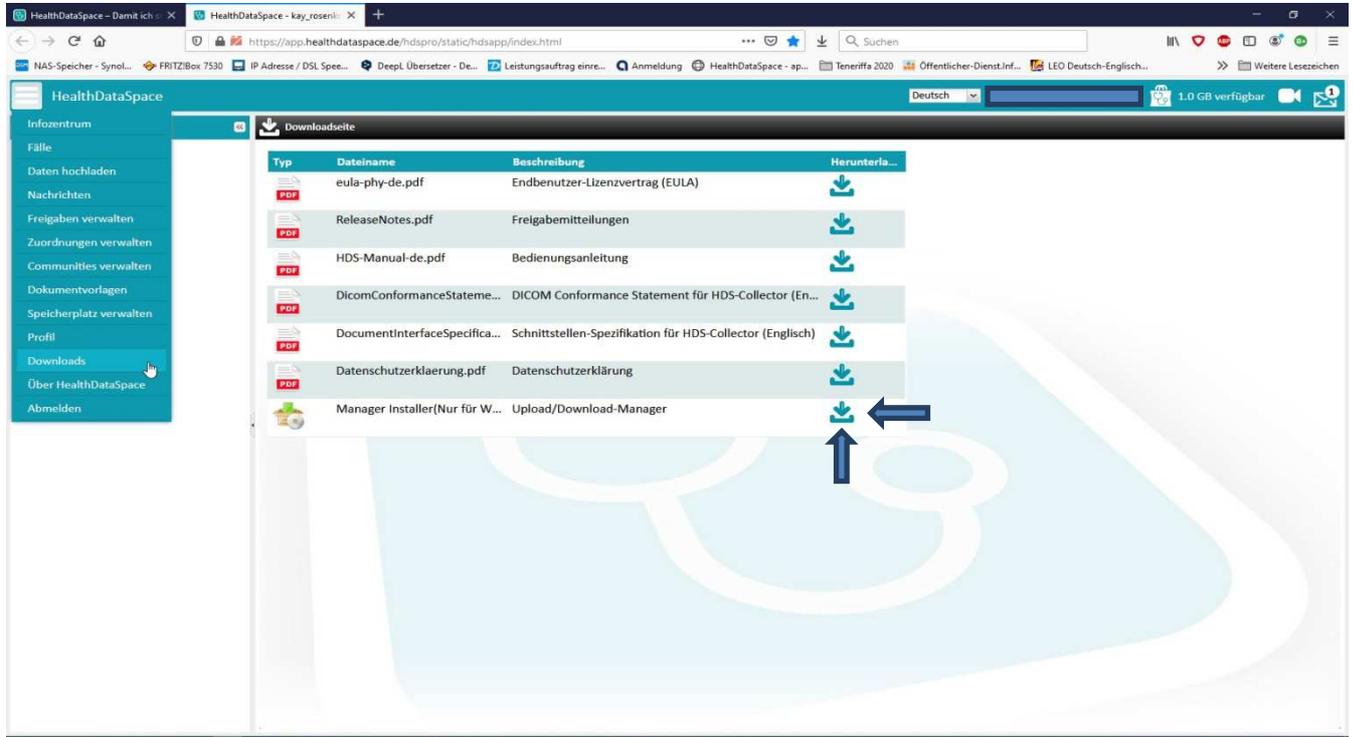

10. Nach dem Download die Datei anklicken, damit das Programm HDS-Manager installiert wird (unterschiedlich, je nach Browser).

11. Nach Beendigung ist das Programm bereit.





II Konfiguration HDS-Manager:

1. Anmeldung im Programm mit den Daten vom HDS (siehe oben) mit Email Adresse und PW
2. Im Programm oben links auf **Datei** und im Pulldown-Menü auf **Einstellungen** klicken.

I. Unter **Konto**: oben links bei **Speichern** ein Häkchen setzen und Anmeldeinformationen eingeben (die Daten des HDS-Accounts – siehe oben), unten rechts auf **Speichern** klicken.


II. Unter **Herunterladen** Downloadverzeichnis eingeben (Lokaler Ordner auf der eigenen Festplatte)


III. Unter **DICOM-Versand** die Daten des eigenen PACS-Servers (sofern vorhanden) angeben, hier ggf. Rückfrage an eigenen IT-Verantwortlichen zur Konfiguration.

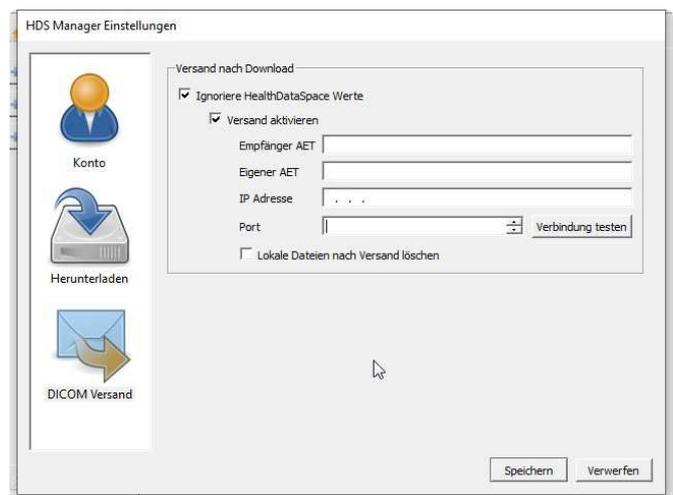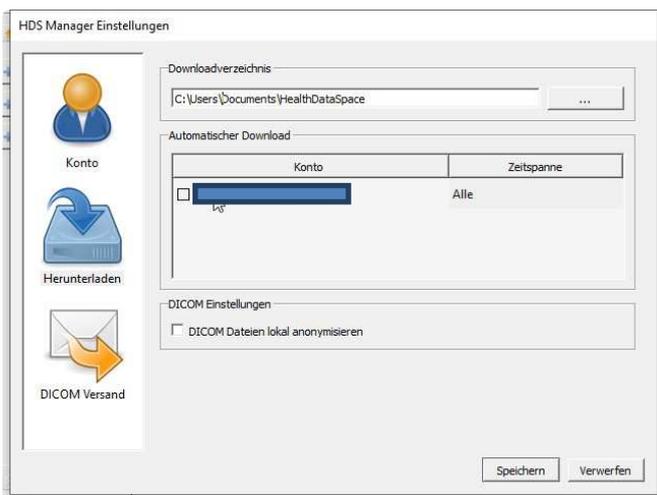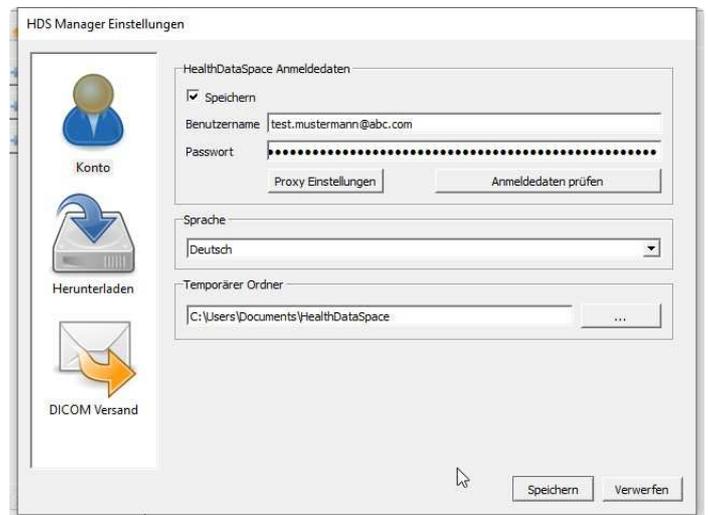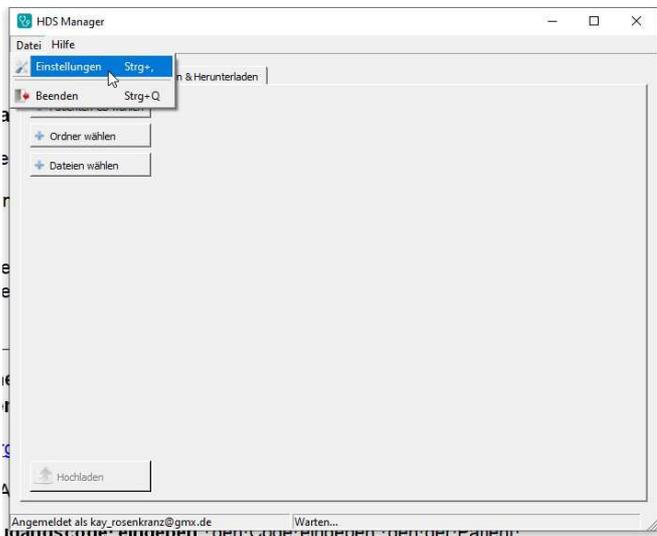

II Patientenbilder in eigenem Account importieren und/oder lokal auf der Festplatte und/oder eigenem PACS speichern

1. Auf <https://app.healthdataspace.de/> gehen mit dem Internetbrowser.
2. Anmeldung mit eigenem Account (siehe oben).
3. Unter dem Punkt „**HDS-Zugangscode eingeben**“ den Code eingeben, den der Patient mitbringt und Enter drücken oder auf **Weiter** klicken, dann werden die Bilder direkt angezeigt (zu diesem Zeitpunkt werden die Bilder aus dem Netz aufgerufen und sind noch nicht im eigenen Account oder lokal auf dem eigenen PC)
4. Auf den Menüpunkt Liste klicken (unter dem Patientennamen und links neben **Bilder**).
5. **Daten Importieren** auswählen. Frage zum Datenimport mit **JA** beantworten, das nächste Fenster **Datenimport** mit **Schließen** beenden.
6. Nachdem die Bilder importiert (was je nach Geschwindigkeit des Internetanschlusses nur Sekunden bis wenige Minuten dauert) wurden kann der Punkt **Alles Herunterladen** angeklickt werden. Es öffnet sich ein Fenster (INFO), hier auf das **Kästchen** klicken, dass der HDS-Manager bereits installiert wurde und dann unten rechts auf **Herunterladen. Ein bis zwei Fragen, wie der Browser den Link aufrufen soll müssen bestätigt werden (unterschiedlich, je nach Browser)**. Dann startet im Hintergrund der HDS-Manager und lädt die Bilder in das Verzeichnis auf der lokalen Festplatte, welches bei der Konfiguration unter Punkt II eingegeben wurde. Es gibt eine Fortschrittsanzeige, die anzeigt wie weit der Download ist. Je nach Geschwindigkeit dauert der Download Sekunden bis wenige Minuten.
7. Wenn die Daten zu einem PACS-Server bei den HDS-Manager Einstellungen (siehe II) eingegeben wurden, dann werden die Bilder auch direkt ins lokale PACS gesendet

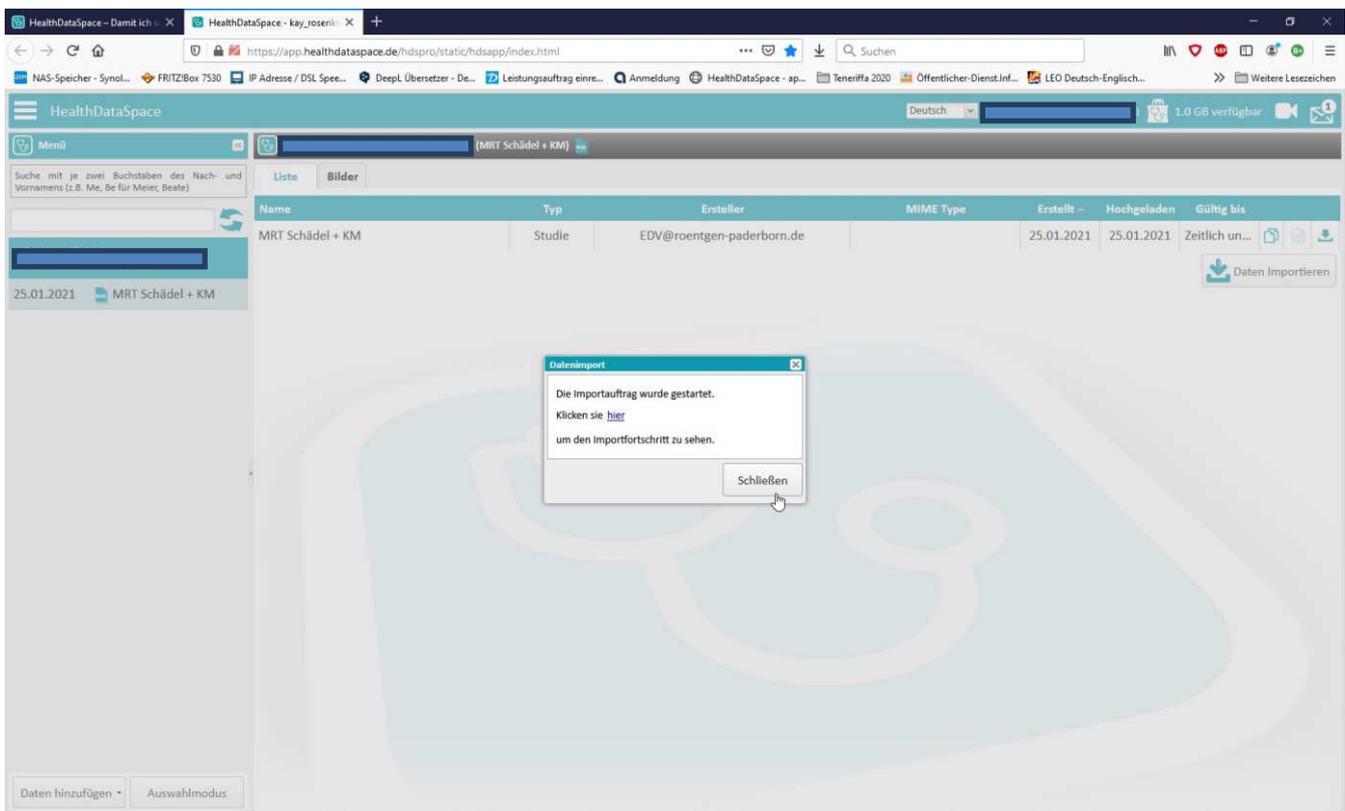

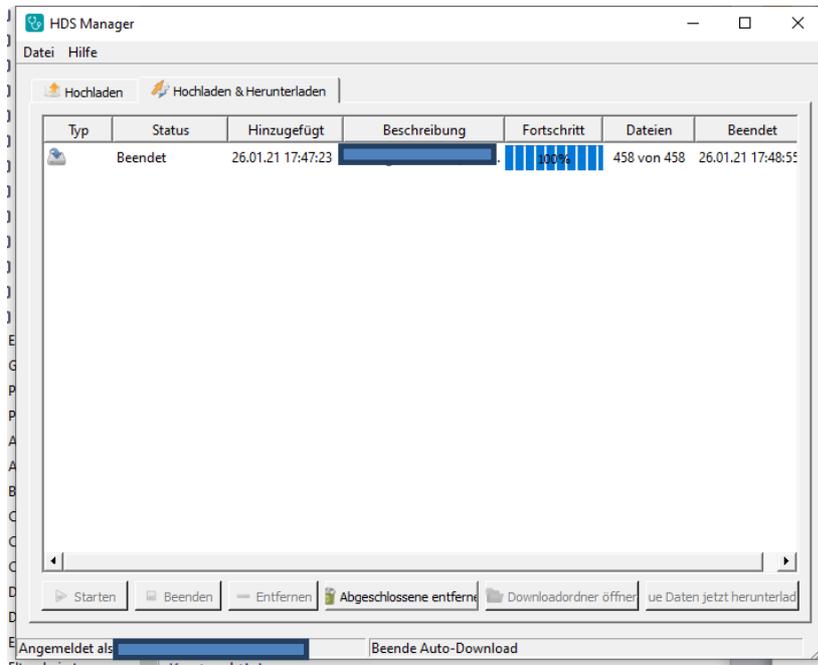

8. Die Bilder sind dann entweder direkt über das Downloadverzeichnis mit jedem DICOM-Viewer abrufbar oder über das PACS, sollte ein solches vorhanden sein.

Bei etwaigen Fragen wenden Sie sich gerne an uns unter 05251/1880-800

Als Ansprechpartner stehen Frau Breitkopf und Frau Voss als Mitarbeiterinnen

und Herr Rosenkranz als ärztlicher Ansprechpartner zur Verfügung